

ma-maternite-
en-pharmacie.fr

POUR
BIEN VOUS
ACCOMPAGNER


LIVRET D'ALLAITEMENT

- Mode d'emploi du tire-lait SATURN
- Détail des programmes
- Conservation du lait et nettoyage du tire-lait
- Choisir la bonne taille de tétérelle : réglette de mesure


DES CONSEILS
SUR NOTRE
BLOG SANTÉ



ma-maternite-en-pharmacie.fr

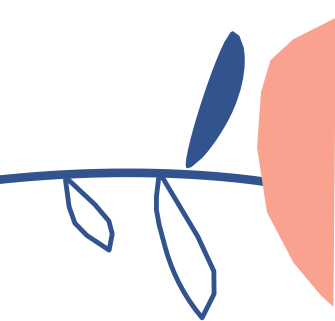

MODE D'EMPLOI TIRE LAIT SATURN

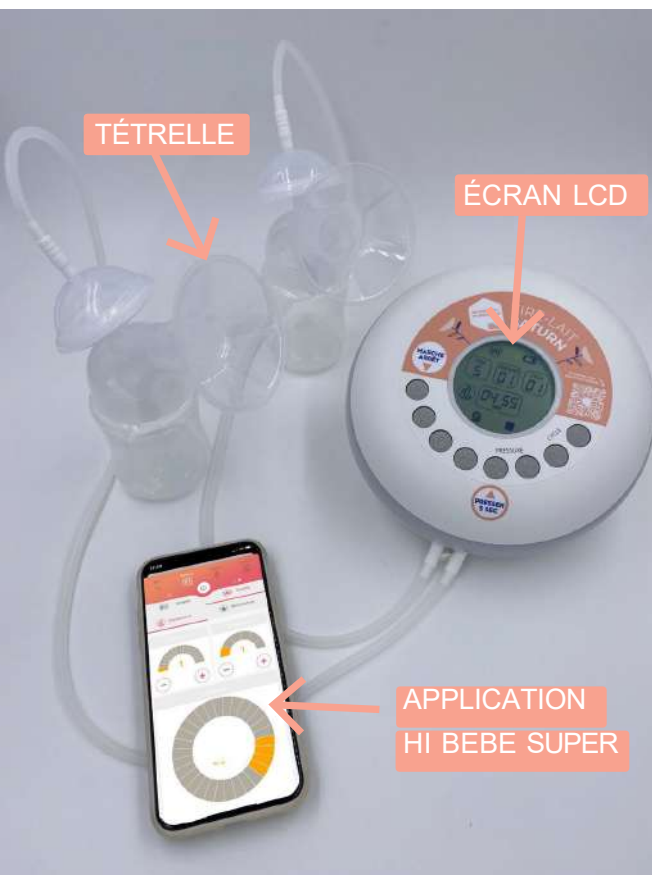

BOUTONS



On / Off



Lampe



Programmes



Stimulation / Expression (appui court)
Simple / Double pompage (appui long)



Diminution de l'aspiration (appui court)
Lancer le programme (appui long)



Augmentation de l'aspiration (appui court)
Sauter une séquence (appui long)



Diminution de la cadence (appui court)
Arrêt du programme (appui long)



Augmentation de la cadence (appui court)
Réglage temps programme (appui long)

UTILISATION

SANS L'APPLICATION

HI BEBE SUPER

- Montez le ou les kits de pompage.
Important : si vous utilisez le tire-lait en simple pompage, n'oubliez pas de boucher une des arrivées d'air !
- Appuyez sur le bouton On / Off
- Placez la tétérrelle sur la poitrine de manière à ce que le mamelon soit bien centré.
- Choisissez le programme souhaité
- Appuyez 5 secondes sur le bouton pour lancer le programme choisi
- En cas de besoin, réglez la puissance avec les boutons + et -
- En cas d'engorgement, l'utilisation du tire-lait ne doit pas être la même, contactez votre pharmacien afin d'être guidée.

UTILISATION

AVEC L'APPLICATION

HI BEBE SUPER

- À la première utilisation, téléchargez l'application **Hi bebe Super**.
- Ouvrir l'application **Hi Bebe Super**
- Appuyez sur le bouton On / Off du tire-lait
- Le tire-lait se synchronise avec l'application.
- Choisir le programme souhaité dans l'onglet «programmes» et appuyez sur «lecture».
- En cas de besoin, réglez la puissance depuis l'application ou directement avec les boutons + et - du tire-lait.



ATTENTION

Si le pompage est douloureux, la puissance est peut être trop forte ou la taille de la tétérrelle pas adaptée
En cas de questions, contactez votre pharmacien.



PROGRAMMES 1 à 4

TIRE-LAIT SATURN

1 PROGRAMME DE MAINTIEN DE L'ALLAITEMENT

Allaitement déjà installé, simple expression

Séq	Mode	Pression	Fréquence	Temps
1	UU		2 3	02:15
2	UU		4 1	00:05
3	UU		6 1	17:40

2 PROGRAMME DE MAINTIEN DE L'ALLAITEMENT

Allaitement déjà installé, double expression

Séq	Mode	Pression	Fréquence	Temps
1	UU		2 3	02:15
2	UU		4 1	00:05
3	UU		6 1	17:40

3 PROGRAMME D'INITIATION À L'ALLAITEMENT

Allaitement non stabilisé, simple expression

Séq	Mode	Pression	Fréquence	Temps
1	UU		2 3	04:00
2	UU		2 2	03:00
3	UU		3 1	02:00
4	UU		2 3	04:00
5	UU		2 2	03:00
6	UU		3 1	02:00
7	UU		2 3	12:00

4 PROGRAMME D'INITIATION À L'ALLAITEMENT

Allaitement non stabilisé, double expression

Séq	Mode	Pression	Fréquence	Temps
1	UU		2 3	04:00
2	UU		2 2	03:00
3	UU		3 1	02:00
4	UU		2 3	04:00
5	UU		2 2	03:00
6	UU		3 1	02:00
7	UU		2 3	12:00



PLUS
D'INFORMATIONS





PROTOCOLE DE CONSERVATION DU LAIT MATERNEL

		RECOMMANDATIONS FRANÇAISES	RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES
Lait frais	À température ambiante maximum 25°C	< 4 h	< 6 h
	Au réfrigérateur (immédiatement après le recueil du lait) à 4°C	< 48 h	< 8 jours
Lait congelé	Au congélateur à -18°C	< 4 mois	< 12 mois
	Complètement décongelé et placé au réfrigérateur à 4°C	< 24 h	< 24 h
Les deux	Lait frais réfrigéré ou lait congelé, qu'il soit à température ambiante ou réchauffé	< 1h	< 4 h

MAINTENIR LA CHAÎNE DU FROID

⇒ **CONCERNANT LE TRANSPORT**

Maximum 24h, entre 4° et 15°C correspondant à la température obtenue dans une glacière avec accumulateur de froid.



NETTOYAGE DU MATÉRIEL

AVANT TOUTE MANIPLULATION, LAVEZ-VOUS SOIGNEUSEMENT LES MAINS

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


- Stérilisez les embouts et biberon dans une casserole d'eau bouillante pendant 5 à 10 min en veillant à ce que tous les éléments restent immergés. Ne pas stériliser les tubulures.
- Rincez bien.
- Laissez sécher sans essuyer.

APRÈS UTILISATION

- Videz et rincez le biberon à l'eau froide.
- Plongez le biberon et ses accessoires dans de l'eau chaude et du liquide vaisselle.
- Éventuellement vous pouvez ébouillanter le biberon (évitiez la stérilisation à froid).
- Nettoyez le biberon avec un goupillon et rincez, puis, laissez sécher sans essuyer.
- Jetez les ustensiles abîmés ou usagés et remplacez-les par du matériel neuf.



Une simple lingette désinfectante suffira à nettoyer le tire-lait

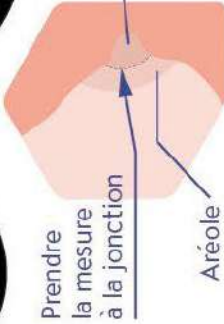

**MESUREZ LA TAILLE
DE VOTRE TÊTERELLE**

21 mm

24 mm

27 mm

30 mm

32 mm

36 mm

La mesure se réalise après une tétée ou après avoir tiré votre lait.


Si vous mesurez votre mamelon au repos, rajoutez lui 2 mm.

Prendre la mesure à la jonction

Mamelon

Aréole



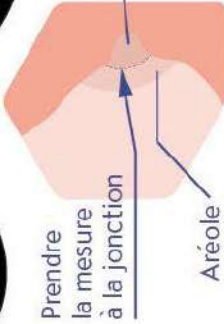

**DES CONSEILS
SUR NOTRE
BLOG SANTÉ**

ma-maternite-en-pharmacie.fr

**SCANNEZ
MOI !**





ma-maternite-en-pharmacie.fr

**POUR
BEN VOUS
ACCOMPAGNER**

une marque du groupe **Handipharm**

4057 - Réglette tétère
ma-maternite-en-pharmacie.fr

6 700918 615138