

ma-maternite-
en-pharmacie.fr

POUR
BIEN VOUS
ACCOMPAGNER

LIVRET D'ALLAITEMENT



- Mode d'emploi du tire-lait SATURN
- Détail des programmes
- Conservation du lait et nettoyage du tire-lait
- Choisir la bonne taille de tétérèlle : réglette de mesure

DES CONSEILS
SUR NOTRE
BLOG SANTÉ



ma-maternite-en-pharmacie.fr

MODE D'EMPLOI TIRE LAIT SATURN

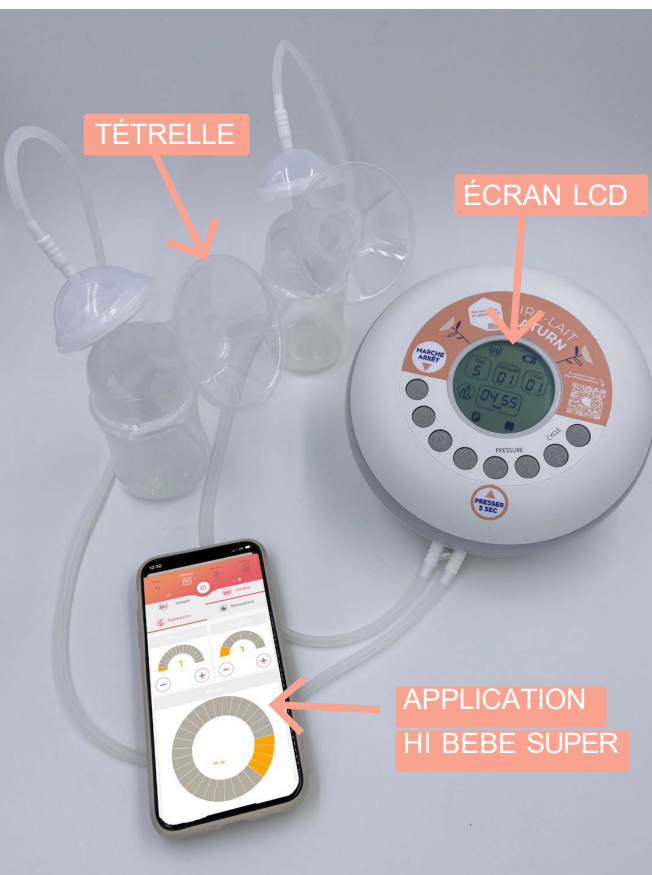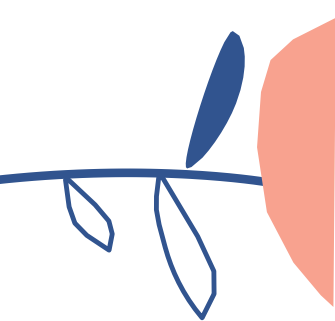



BOUTONS

-  On / Off
-  Lampe
-  Programmes
-  Stimulation / Expression (appui court)
Simple / Double pompage (appui long)
-  Diminution de l'aspiration (appui court)
Lancer le programme (appui long)
-  Augmentation de l'aspiration (appui court)
Sauter une séquence (appui long)
-  Diminution de la cadence (appui court)
Arrêt du programme (appui long)
-  Augmentation de la cadence (appui court)
Réglage temps programme (appui long)

UTILISATION

SANS L'APPLICATION








HI BEBE SUPER

-  Montez le ou les kits de pompage. Important : si vous utilisez le tire-lait en simple pompage, n'oubliez pas de boucher une des arrivées d'air !
-  Appuyez sur le bouton On / Off 
-  Placez la téterelle sur la poitrine de manière à ce que le mamelon soit bien centré.
-  Choisissez le programme souhaité 
-  Appuyez 5 secondes sur le bouton pour lancer le programme choisi 
-  En cas de besoin, réglez la puissance avec les boutons + et - .
-  En cas d'engorgement, l'utilisation du tire-lait ne doit pas être la même, contactez votre pharmacien afin d'être guidée.

UTILISATION

AVEC L'APPLICATION

HI BEBE SUPER

-  À la première utilisation, téléchargez l'application **Hi bebe Super**.
-  Ouvrir l'application **Hi Bebe Super**
-  Appuyez sur le bouton  On / Off du tire-lait
-  Le tire-lait se synchronise avec l'application.
-  Choisir le programme souhaité dans l'onglet «programmes» et appuyez sur «lecture».
-  En cas de besoin, réglez la puissance depuis l'application ou directement avec les boutons + et - du tire-lait.



ATTENTION

Si le pompage est douloureux, la puissance est peut être trop forte ou la taille de la téterelle pas adaptée
En cas de questions, contactez votre pharmacien.




PROGRAMMES 1 à 4 TIRE-LAIT SATURN

ma-maternite-
en-pharmacie.fr

POUR
BIEN VOUS
ACCOMPAGNER







1 PROGRAMME DE MAINTIEN DE L'ALLAITEMENT

Allaitement déjà installé, simple expression

Séq	Mode	Pression	Fréquence	Temps	
1			2	3	02:15
2			4	1	00:05
3			6	1	17:40

2 PROGRAMME DE MAINTIEN DE L'ALLAITEMENT

Allaitement déjà installé, double expression

Séq	Mode	Pression	Fréquence	Temps	
1			2	3	02:15
2			4	1	00:05
3			6	1	17:40






3 PROGRAMME D'INITIATION À L'ALLAITEMENT

Allaitement non stabilisé, simple expression

Séq	Mode	Pression	Fréquence	Temps	
1			2	3	04:00
2			2	2	03:00
3			3	1	02:00
4			2	3	04:00
5			2	2	03:00
6			3	1	02:00
7			2	3	12:00

4 PROGRAMME D'INITIATION À L'ALLAITEMENT

Allaitement non stabilisé, double expression

Séq	Mode	Pression	Fréquence	Temps	
1			2	3	04:00
2			2	2	03:00
3			3	1	02:00
4			2	3	04:00
5			2	2	03:00
6			3	1	02:00
7			2	3	12:00



PLUS

D'INFORMATIONS





PROTOCOLE DE CONSERVATION DU LAIT MATERNEL

		RECOMMANDATIONS FRANÇAISES	RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES
Lait frais	À température ambiante maximum 25°C	< 4 h	< 6 h
	Au réfrigérateur (immédiatement après le recueil du lait) à 4°C	< 48 h	< 8 jours
Lait congelé	Au congélateur à -18°C	< 4 mois	< 12 mois
	Complètement décongelé et placé au réfrigérateur à 4°C	< 24 h	< 24 h
Les deux	Lait frais réfrigéré ou lait congelé, qu'il soit à température ambiante ou réchauffé	< 1h	< 4 h

MAINTENIR LA CHAÎNE DU FROID

⇒ **CONCERNANT LE TRANSPORT**

Maximum 24h, entre 4° et 15°C correspondant à la température obtenue dans une glacière avec accumulateur de froid.



NETTOYAGE DU MATÉRIEL

AVANT TOUTE MANIPLULATION, LAVEZ-VOUS SOIGNEUSEMENT LES MAINS

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Stérilisez les embouts et biberon dans une casserole d'eau bouillante pendant 5 à 10 min en veillant à ce que tous les éléments restent immergés. Ne pas stériliser les tubulures.
- Rincez bien.
- Laissez sécher sans essuyer.

APRÈS UTILISATION


- Videz et rincez le biberon à l'eau froide.
- Plongez le biberon et ses accessoires dans de l'eau chaude et du liquide vaisselle.
- Éventuellement vous pouvez ébouillanter le biberon (évitiez la stérilisation à froid).
- Nettoyez le biberon avec un goupillon et rincez, puis, laissez sécher sans essuyer.
- Jetez les ustensiles abîmés ou usagés et remplacez-les par du matériel neuf.



Une simple lingette désinfectante suffira à nettoyer le tire-lait

RÉGLETTE DE PRISE DE MESURE – À IMPRIMER

MESUREZ LA TAILLE DE VOTRE TÉTÉRELLE



21 mm


24 mm

27 mm

30 mm

32 mm

36 mm

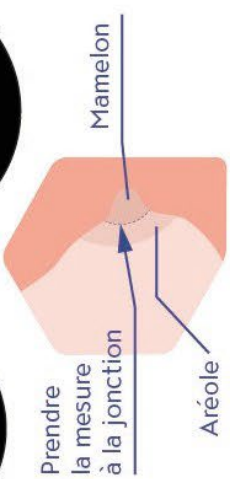




Prendre la mesure à la jonction

Mamelon

Aréole

La mesure se réalise après une tétée ou après avoir tiré votre lait.

Si vous mesurez votre mamelon au repos, rajoutez lui 2 mm.




SCANNEZ MOI !

DES CONSEILS SUR NOTRE BLOG SANTÉ

ma-maternite-en-pharmacie.fr

ma-maternite-en-pharmacie.fr

POUR BIEN VOUS ACCOMPAGNER

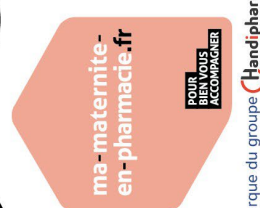

une marque du groupe Handipharm

21 mm


24 mm

27 mm

30 mm

32 mm

36 mm



40167 - Réglette tétérille
ma-maternite-en-pharmacie.fr
3 700918 619338