



NOUVEAU

Invacare® | **Cosy Up**

Ultra personnalisable et très confortable !



Grandes pochettes latérales

Fauteuil équipé de deux pochettes, une à gauche, l'autre à droite, pour y mettre des magazines ou des petits objets.



Caractéristiques et options



Revêtements amovibles pour lavage en machine

Les accoudoirs, le dossier et l'assise couette sont fixés sur la base du fauteuil releveur grâce à des systèmes de zip et de velcro. Tous ces éléments sont donc amovibles très facilement, ce qui permet le lavage en machine à 30° ou 40° selon les tissus.



La télécommande toujours à portée de main

Pratique, grâce à la conception des accoudoirs, l'utilisateur a la possibilité de placer la télécommande du fauteuil (ou celle de la télévision) sous les revêtements d'accoudoirs. Ainsi, la télécommande est toujours accessible !

Options et Configurations



Version 1 moteur

Télécommande ergonomique 2 boutons rétroéclairés, simple d'utilisation.



Version 1 moteur avec télécommande intégrée et port USB

Télécommande intuitive et discrète, placée à droite. Cette télécommande intégrée est couplée avec une prise USB pour permettre de recharger son téléphone ou de brancher tout appareil disposant d'un port USB.



Version 2 moteurs

Télécommande ergonomique 4 boutons + 2 boutons de synchronisation, simple d'utilisation.



Fonction dos au mur

Grâce à la fonction dos au mur, de série sur la version 1 moteur du **Cosy Up**, le dossier du fauteuil releveur peut être placé très près d'un mur sans que cela n'entrave la parfaite utilisation de toutes les fonctions. Grâce à une conception optimisée pour les petits espaces, seulement 9 cm sont nécessaires entre le mur et le fauteuil pour permettre une inclinaison totale du dossier.

Caractéristiques et options



NOUVEAU

Base conforme anti-feu

Nouvelle base PVC Taupe conforme aux normes anti-feu EN 1021-1 et 1021-2 en vigueur dans les EHPAD et maisons de retraite. À combiner avec les tissus EasyClean ayant les mêmes caractéristiques pour un **Cosy Up** entièrement conforme.



NOUVEAU



NOUVEAU



Appui-tête rembourré

Pour un meilleur maintien et pour un confort optimal durant tous vos instants de repos.
Disponible en accessoire. Réf. 1650214

Nouveau tissu Graphique

Pour un fauteuil toujours plus confortable, le set de coussin Graphique est disponible sur le **Cosy Up** (réf. 1650213). Ce tissu design, en coton très résistant est facile à entretenir et correspond à tous les environnements.



NOUVEAU



EasyClean Jaune

EasyClean Bleu

EasyClean Taupe

Tissus EasyClean : nettoyable à l'eau !

Tissu antibactérien et déperlant, traité spécialement pour un nettoyage à l'eau. Les tissus EasyClean permettent d'enlever les tâches quotidiennes comme le café, le chocolat ou encore le vin uniquement avec un linge propre et de l'eau. Le tissu EasyClean empêche les tâches de pénétrer dans le tissu et protège ainsi durablement le fauteuil.

Pratique et esthétique, ce tissu anti-tâche prévient la moisissure et résiste au feu conformément aux normes EN 1021-1 et EN 1021-2. Lavables en machine jusqu'à 40°C et aptes au sèche-linge, les coussins EasyClean tendances et confortables font du **Cosy Up**, le fauteuil idéal pour une utilisation en collectivité, en EHPAD et en maisons de retraite !



Caractéristiques et options

Cosy Up : mixez, choisissez et changez de coloris suivant vos humeurs !

Avec ses **6 choix de coloris de coussins** et ses **4 choix de bases**, le **Cosy Up** est LE fauteuil releveur **configurable**. Changez de housse comme d'humeur et transformez votre intérieur en seulement quelques minutes. La configurabilité du **Cosy Up** permet au distributeur, dans un espace réduit, de présenter plusieurs coloris en changeant uniquement le coussin (gains de place et d'inventaire !).

Vous pouvez commander au choix soit un fauteuil complet ou bien créer le fauteuil qui vous plaît, en sélectionnant la base et en choisissant les coussins que vous souhaitez : vous pouvez maintenant changer autant de fois que vous le voulez !

Bases



**Base télécommande 1
moteur PVC Taupe**

Réf. 1650169



**Base télécommande 1
moteur PVC Taupe anti-
feu EN 1021-1 et 1021-2**

Réf. 1650207



**Base télécommande
intégrée et port USB 1
moteur PVC Taupe**

Réf. 1650206



**Base télécommande 2
moteurs PVC Taupe**

Réf. 1650205

Coussins



EasyClean Jaune

anti-feu EN 1021-1 et
1021-2

Réf. 1650210



EasyClean Bleu

anti-feu EN 1021-1 et
1021-2

Réf. 1650211



EasyClean Taupe


anti-feu EN 1021-1 et
1021-2

Réf. 1650212



Tissu Graphique

Réf. 1650213

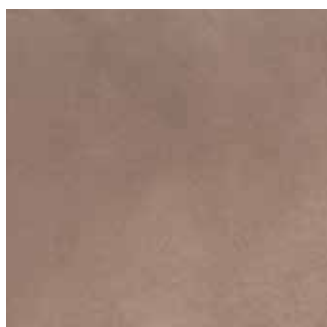

Microfibre Taupe

Réf. 1650208



PVC/Polyester Taupe

Réf. 1650209



Tableau des caractéristiques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Position Relax	Position Releveur	Position Repos	Continuité entre assise et repose-pieds	Prof. d'assise	Hauteur d'assise	Largeur d'assise	Inclinaison maximum du dossier
1 Moteur Dos au Mur	◆	◆		◆	450 ou 540 mm	480 mm	450 ou 530 mm	120°
2 Moteurs	◆	◆	◆	◆	450 ou 540 mm	480 mm	450 ou 530 mm	135°

	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Profondeur hors tout Fermé	Profondeur hors tout Ouvert	Recul nécessaire pour inclinaison maximale	Hauteur sol/accoudoirs	Poids maximum utilisateur	Poids du produit	Densité de la mousse
1 Moteur Dos au Mur	1050 mm	770 ¹ / 800 mm	910 mm	1520 mm	90 mm	640 ¹ / 700 mm	125 kg	57 kg	Assise 28kg/m ³ Accoudoirs 18kg/m ³
2 Moteurs	1050 mm	770 ¹ / 800 mm	910 mm	1720 mm	460 mm	640 ¹ / 700 mm	125 kg	57 kg	Assise 28kg/m ³ Accoudoirs 18kg/m ³

1. sans revêtement d'accoudoir

Les fauteuils complets

1644970 : 1 Moteur - Base PVC/Polyester Taupe - Coussin Microfibre Taupe
1650215 : 1 Moteur - Base PVC/Polyester Taupe - Coussin PVC/Polyester Taupe
1650227 : 1 Moteur - Base PVC/Polyester Taupe - Coussin Antibactérien EasyClean Taupe
1650216 : 1 Moteur - Base PVC/Polyester Taupe - Coussin Antibactérien EasyClean Jaune
1650217 : 1 Moteur - Base PVC/Polyester Taupe - Coussin Antibactérien EasyClean Bleu
1650228 : 1 Moteur - Base PVC/Polyester Taupe - Coussin tissu Graphique

1650229 : 1 Moteur - Base PVC/Polyester Taupe avec télécommande intégrée et prise USB - Coussin Microfibre Taupe
1650230 : 1 Moteur - Base PVC/Polyester Taupe avec télécommande intégrée et prise USB - Coussin PVC/Polyester Taupe
1650233 : 1 Moteur - Base PVC/Polyester Taupe avec télécommande intégrée et prise USB - Coussin Antibactérien EasyClean Taupe
1650231 : 1 Moteur - Base PVC/Polyester Taupe avec télécommande intégrée et prise USB - Coussin Antibactérien EasyClean Jaune
1650232 : 1 Moteur - Base PVC/Polyester Taupe avec télécommande intégrée et prise USB - Coussin Antibactérien EasyClean Bleu
1650234 : 1 Moteur - Base PVC/Polyester Taupe avec télécommande intégrée et prise USB - Coussin tissu Graphique

1650235 : 1 Moteur - 100% Non-Feu - Base PVC/Polyester non-feu Taupe - Coussin Antibactérien EasyClean Taupe
1650236 : 1 Moteur - 100% Non-Feu - Base PVC/Polyester non-feu Taupe - Coussin Antibactérien EasyClean Jaune
1650237 : 1 Moteur - 100% Non-Feu - Base PVC/Polyester non-feu Taupe - Coussin Antibactérien EasyClean Bleu

1644971 : 2 Moteurs - Base PVC/Polyester Taupe - Coussin Microfibre Taupe
1650238 : 2 Moteurs - Base PVC/Polyester Taupe - Coussin PVC/Polyester Taupe
1650241 : 2 Moteurs - Base PVC/Polyester Taupe - Coussin Antibactérien EasyClean Taupe
1650239 : 2 Moteurs - Base PVC/Polyester Taupe - Coussin Antibactérien EasyClean Jaune
1650240 : 2 Moteurs - Base PVC/Polyester Taupe - Coussin Antibactérien EasyClean Bleu
1650242 : 2 Moteurs - Base PVC/Polyester Taupe - Coussin tissu Graphique

Tel. : +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France

